

期間：～2022年10月31日

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE
研究用 www.funakoshi.co.jp
日本総代理店

IT-IS
Life Science Ltd

IT-IS Life Science Ltd
[メーカー略称:ILS]

台数
限定!!

MyGo Mini S

特別価格 + 延長保証 キャンペーン



キャンペーンの詳細はWebページ番号

81639

検索



MyGo Mini Sはコンパクトで高性能なリアルタイムPCR装置です。

高い温度均一性

高い分解能

手のひらサイズ

誰でも使いやすい測定・解析ソフトウェアが付属

通常よりお得に、長く安心して使えるこの機会を
ぜひご利用下さい！



合計**35万円相当**
がお得に!!

特別価格

リアルタイムPCR装置が
100万円未満!

通常価格

~~¥1,050,000~~

キャンペーン価格


¥900,000

延長保証

基本保証期間を
1年間延長(計2年間)!

保証期間内の正常なご使用状態において発生した不具合について、無償で修理対応いたします。
さらに、有償で保証期間を購入から最大5年間に延長することも可能です*。

* 1年間の延長を最大3回ご購入いただく方法と、3年間の延長を1回ご購入いただく方法があります(下記参照)。

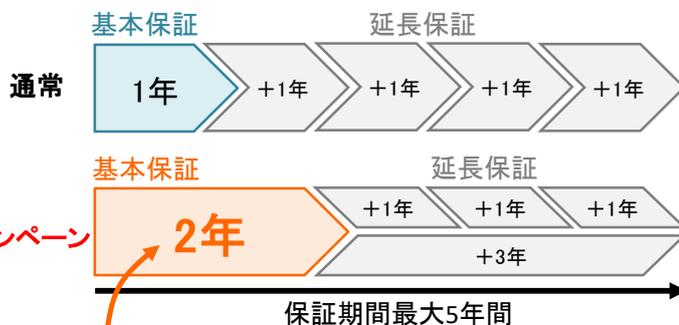

延長保証1回分(1年間, 20万円相当)が追加!

IT-IS Life Science Ltd [メーカー略称:ILS]

品名	商品コード	包装
MyGo Mini S, Blue	6321	1 unit
MyGo Mini S, Orange	8556	1 unit
MyGo Mini S, Red	5733	1 unit




IT-IS Life Science Ltd [メーカー略称:ILS]

延長保証	商品コード	包装	価格
1年間	8082	1 ORDER	¥200,000
3年間	8082-3	1 ORDER	¥300,000

MyGo Mini Sの特長については裏面をご覧ください。


MyGo Mini S の特長

高い温度均一性

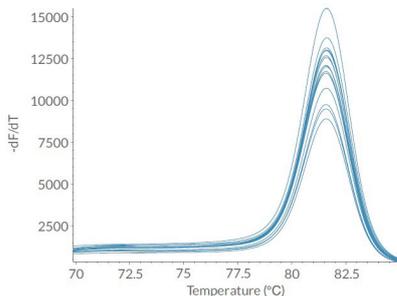

10,000コピーのウイルスDNA(16試料)のPCR反応とTm解析結果。Tm値の平均は81.7°C, SDは0.015°Cと、ブロック間での温度均一性が高い。

高い分解能

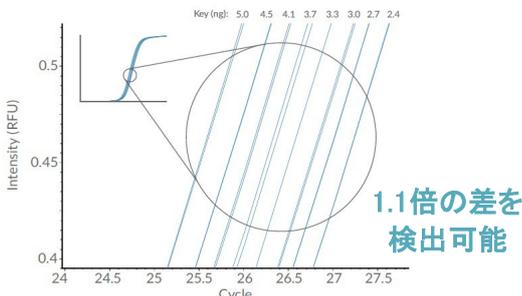

ヒトcDNA試料を, 5 ng ~ 2.4 ng (1.1倍差)の各濃度に調製し, qPCRを行った。

手のひらサイズ




リッドの開閉やスタートを声でお知らせ!


誰でも使いやすい測定・解析ソフトウェアが付属

様々なアプリケーションに対応し、実験を強力にサポート


① 図や色で直感的に操作可能

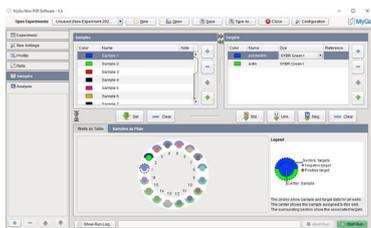

② 遺伝子発現/コピー数の比較

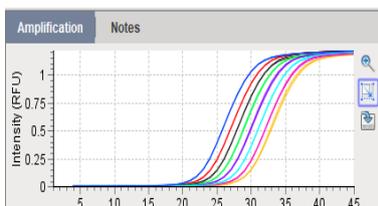

③ 高解像度融解曲線 (HRM) 解析

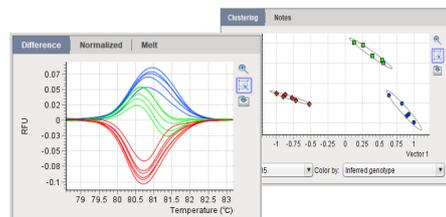

Connectivity

3種類の方法(右記参照)でMyGo Mini S本体からお手持ちのパソコンにデータを取り込むことが可能です。

Compatibility

制御・解析ソフトウェアはMac OS X, Windows(7以上), Linuxに対応しています。
※別途パソコンが必要です。

検出可能な蛍光色素

SYBR® Green I, ResoLight, TaqMan® Probe(FAM), VIC, HEX, CAL 540, CAL 560



温度制御方法	ペルティエ素子
チューブ収容本数	16
対応PCRチューブ	0.1 ml single tube
必要試料量	10~100 μ l(推奨容量: 20 μ l)
温度範囲	37~99°C
加熱・冷却速度	3°C/秒(加熱), 1.5°C/秒(冷却)
温度均一性	\pm 0.1°C
温度精度	\pm 0.25°C
反応時間	< 60 分
チャンネル数	3 optical channels

蛍光励起波長	475 nm (blue LED)
蛍光検出波長	510~560 nm (CMOS array)
検出感度	Single copy detection
ダイナミック・レンジ	9-log
測定精度	1.1倍を検出可能
運転騒音	< 40 dB(A)
電源	AC 100~240 V(\pm 10%)/47~63 Hz
消費電力	90 W
サイズ, 質量	12 ^W × 12 ^D × 16 ^H cm, 2.5 kg

NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2022年6月1日現在です。
 ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
 ※ Δ 印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。

※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
 ※ 記載されている会社及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
 ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
 ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(ILS)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

日本総代理店 フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
<https://www.funakoshi.co.jp> info@funakoshi.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ
 TEL 03-5684-1619 kiki@funakoshi.co.jp

デモ・在庫・納期などについて
 TEL 03-5684-1615 sales@funakoshi.co.jp

funakoshi

[@Funakoshi_CoLtd](https://twitter.com/Funakoshi_CoLtd)
[フナコシ株式会社](https://www.youtube.com/channel/UC...)